



Riassunto delle istruzioni e delle avvertenze per l'uso del **SPLASH! – Paranco acquatico per pazienti**

Leggere e seguire tutte le istruzioni per l'uso elencate nel manuale del proprietario prima dell'uso.

Leggere e seguire tutte le etichette di attenzione e di pericolo situate sul paranco prima dell'us.



Avvertenze e riassunto della sicurezza

PERICOLO - LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE, ISTRUZIONI E DEL MANUALE D'USO PUÒ PROVOCARE LESIONI GRAVI O MORTALI



ATTENZIONE

- SOLO PER L'USO DA PARTE DEGLI ADULTI - Utilizzare solo da parte dei bambini con la supervisione di un adulto. Solo le persone abbastanza sane per le attività in acqua dovrebbero usare lo SPLASH! Gli utenti dovrebbero consultare il loro medico per determinare se le attività in acqua sono appropriate per l'utente.
- La cintura di sicurezza deve essere usata in ogni momento durante il trasferimento dell'utente.
- NON SALTARE/IMMERGERSI/SCALARE - Non saltare / immergersi o scalare il paranco.
- Il limite d'uso è di UNA PERSONA di peso inferiore al limite massimo di peso di - 400 libbre (181kg) per lo SPLASH! e SPLASH! Hi/Lo e 300 libbre (136kg) per lo SPLASH! 300 e SPLASH Sbraccio esteso.. Usare solo per il trasferimento dell'utente, non come paranco o gru.
- PERICOLO DI SCOSSA - Tenere sempre le mani e le dita lontane dai bracci del paranco durante l'uso.
- La batteria deve essere completamente rimossa dal paranco e posizionata lontano dal ponte della piscina per la ricarica.



AVVERTENZA

- LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA - Controllare il livello della batteria prima di ogni utilizzo. La batteria deve mostrare VERDE >50% del livello di carica prima dell'uso. Quando viene visualizzato GIALLO <50% del livello di carica, la batteria deve essere completamente carica prima dell'uso. Quando viene mostrato un livello di carica ROSSO <25%, il paranco non deve essere usato e la batteria deve essere completamente caricata prima dell'uso.
- POTREBBERO RISULTARE DANNOSI - Non usare il sedile o il telaio del sedile per spo-stare o posizionare la SPLASH!
- DANNI POTREBBERO RISULTARE - Non permettere all'eccessiva umidità di accumu-larsi nel contenitore della batteria, può influenzare le prestazioni della batteria e del paranco e può portare al guasto della batteria e/o al mancato funzionamento del paranco.



24 VDC



S.R. Smith, LLC
PO Box 400
1017 SW Berg Parkway
Canby, Oregon 97013 USA
Phone: 503-266-2231
Fax: 503-266-4334
www.srsmith.com
Assemblato negli USA




QNET BV
Kanstraat 19
NL-5076 NP Haaren
The Netherlands
qnet@ce-mark.com
qnet@ce-authorizedrepresentative.eu
www.ce-mark.com
www.ce-authorizedrepre-sentative.eu

TRASFERIMENTO

- Trasferire sul sedile, assicurandosi del peso dell'utente.
- Allacciare la cintura di sicurezza e la cinghia di stabilità opzionale.
- Ruotare il sedile in posizione 12:00, sopra l'acqua.
- Abbassare il sedile nella piscina.
- Slacciare la cintura di sicurezza e la cinghia di stabilità opzionale - trasferire in acqua.
- Al termine, tornare al sedile, assicurandosi che il peso dell'utente sia centrato sul sedile.
- Allacciare la cintura di sicurezza o il giubbotto di stabilità opzionale.
- Ruotare il sedile nella posizione di trasferimento originale.
- Alzare / abbassare il sedile all'altezza di trasferimento.
- Slacciare la cintura di sicurezza o l'imbragatura di stabilità opzionale - trasferimento dal sedile.

NOTA: Le dimensioni sono quando il sedile è nella posizione più alta

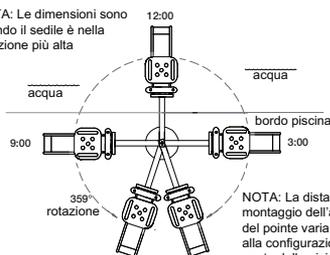

MANUTENZIONE e PULIZIA

- Mantenere tutti i componenti elettronici puliti e asciutti.
- Evitare che la soluzione di disinfezione venga a contatto diretto con la pelle e gli occhi.
- Fare riferimento al manuale dell'utente per la manutenzione e la pulizia settimanale / mensile del paranco.

Eseguire il seguente programma per garantire il corretto funzionamento prima di ogni utilizzo:

Manutenzione eseguita prima di ogni uso	Ogni giorno	Settimanale	Mensile
Controllare il livello della batteria prima di ogni utilizzo / Caricare la batteria quotidianamente.	✓		
Pulire la scatola di controllo e il collegamento della batteria con uno straccio pulito e asciutto.	✓		
Esaminare il paranco per eventuali danni, hardware allentato o mancante.	✓		
Prova tutti i pulsanti di controllo (mano e scatola di controllo) per il funzionamento normale.	✓		
Spruzzare il gruppo ingranaggi con un inibitore di ruggine / lubrificante pesante come LPS 3 - Inibitore pesante.		✓	
Assicurarsi che tutte le connessioni dei cavi siano fissate correttamente.			✓
Ispezionare il quadro dell' paranco, il montante, il braccio di supporto e il montaggio del sedile per verificare la presenza di rus.			✓
Pulizia dopo ogni uso			
Risciacquare il sedile e la cintura di sicurezza/gilet di stabilità con acqua dolce tra ogni uso - Pulire il sedile e la cintura di sicurezza/gilet di stabilità con una soluzione disinfettante di una diluizione 1:100 di candeggina domestica in acqua dolce e poi risciacquare con acqua dolce e asciugare l'intero paranco ogni giorno. In caso di contaminazione di escrementi di pazienti/utenti - pulire immediatamente il sedile e la cintura di sicurezza/gilet di stabilità immediatamente con la soluzione disinfettante*.	✓		
Pulire tutte le connessioni della batteria con una spugna di nylon.			✓
Pulire tutte le superfici metalliche con una cera detergente per mantenere la finitura del paranco.			✓

* Quando si usa la soluzione di disinfezione, evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi. In caso di contaminazione, immergere la cintura di sicurezza o la cinghia di stabilità nella soluzione disinfettante per 10 minuti e poi risciacquare abbondantemente con acqua fresca.