



Resumen de las instrucciones y advertencias de uso del

SPLASH! - ELEVADOR ACUÁTICO PARA PACIENTES

Lea y siga todas las instrucciones de uso indicadas en el manual del propietario antes de utilizarlo.

Lea y siga todas las etiquetas de precaución y advertencia situadas en el elevador antes de utilizarlo.



Advertencias y resumen de seguridad

PELIGRO - EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y DEL MANUAL DEL PROPIETARIO PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE



ATENCIÓN

- USO ADULTO ÚNICAMENTE - Utilización por parte de los niños con la supervisión de un adulto. ¡Solo las personas suficientemente sanas para realizar actividades acuáticas deben utilizar el SPLASH! Los usuarios deben consultar con su médico para determinar si las actividades acuáticas son apropiadas para el usuario.
- El cinturón de seguridad debe utilizarse en todo momento durante el traslado del usuario.
- NO SE DEBE BUCEAR, BUCEAR NI ESCALAR - No se debe bucear, bucear ni subir al elevador.
- ¡El límite de uso es de UNA PERSONA que pese menos que el límite máximo de peso de - 400lbs (181kg) para el SPLASH! ¡y SPLASH! ¡Hi/Lo y 300lbs (136kg) para el SPLASH! ¡300 y SPLASH! Alcance extendido. Utilícelo sólo para trasladar al usuario, no como elevador o grúa.
- PELIGRO DE PELLIZCO / ARRANQUE - Mantenga siempre las manos y los dedos alejados de los brazos del elevador durante su uso.
- La batería debe retirarse completamente del elevador y situarse lejos de la cubierta de la piscina para su carga.



ADVERTENCIA

- NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA - Compruebe el nivel de la batería antes de cada uso. La batería debe mostrar un nivel de carga VERDE > 50% de nivel de carga antes de usarla. Cuando se muestra un nivel de carga AMARILLO <50%, la batería debe estar completamente cargada antes de su uso. Cuando se muestra un nivel de carga ROJO <25%, el elevador no debe ser utilizado y la batería debe ser cargada completamente antes de su uso.
- ¡PUEDEN PRODUCIRSE DAÑOS - No utilice el asiento o el bastidor del asiento para mover o posicionar el Splash!.
- PUEDE PRODUCIRSE UN DAÑO -No permita que se acumule un exceso de humedad en la caja de la batería, ya que puede provocar un fallo en la batería y/o en el funcionamiento del elevador.



24 VDC



S.R. Smith, LLC
PO Box 400
1017 SW Berg Parkway
Canby, Oregon 97013 USA
Phone: 503-266-2231
Fax: 503-266-4334
www.srsmith.com
Montado en EE. UU




QNET BV
Kanstraat 19
NL-5076 NP Haaren
The Netherlands
qnet@ce-mark.com
qnet@ce-authorizedrepresentative.eu
www.ce-mark.com
www.ce-authorizedrepre-sentative.eu

TRASLADO

- Haga la transferencia al asiento, asegurándose de que el peso del usuario es centrado en el asiento.
- Abróchese el cinturón de seguridad o el chaleco de estabilidad opcional.
- Gire el asiento a la posición de las 12:00, sobre el agua.
- Baje el asiento a la piscina.
- Desabroche el cinturón de seguridad o el chaleco de estabilidad opcional, y páselo al agua.
- Cuando termine, vuelva al asiento, asegurándose de que el peso del usuario esté centrado en el asiento.
- Gire el asiento hasta la posición de transferencia original.
- Eleve o baje el asiento hasta la altura adecuada para la transferencia.
- Desabroche el cinturón de seguridad o el chaleco de estabilidad opcional y transfírase fuera del asiento.

NOTA: Las dimensiones son cuando el asiento está en su posición más alta agua

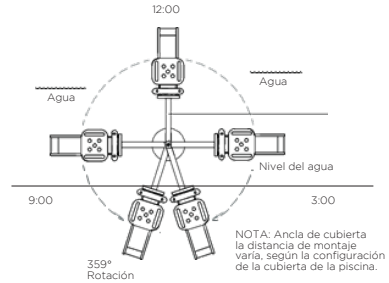

MANTENIMIENTO y LIMPIEZA

- Mantenga todos los componentes electrónicos limpios y secos.
- No permita que la solución de desinfección tenga contacto directo con la piel y los ojos.
- Consulte el manual del propietario para el mantenimiento y la limpieza semanal o mensual del elevador.

Realice el siguiente programa para asegurar el funcionamiento correcto antes de cada uso:

Mantenimiento realizado antes de cada uso	Diario	Semanalmente	Mensualmente
Compruebe el nivel de la batería antes de cada uso / Cargue la batería diariamente.	✓		
Limpie la caja de control y la conexión de la batería con un trapo limpio y seco.	✓		
Examinar el elevador para ver si hay daños, herrajes sueltos o faltantes.	✓		
Compruebe el funcionamiento normal de todos los botones de control (mano y caja de control).	✓		
Rocíe el conjunto del engranaje con un inhibidor de óxido / lubricante de alta resistencia como LPS 3 -Inhibidor de alta resistencia.		✓	
Asegúrese de que todas las conexiones de los cables están bien aseguradas.			✓
Inspeccionar el bastidor del polipasto, el mástil, el brazo de soporte y el conjunto del asiento en busca de óxido.			✓
La limpieza se realiza después de cada uso			
Limpie el asiento y el cinturón de seguridad / chaleco de estabilidad con agua dulce entre cada uso - Limpie el asiento y el cinturón de seguridad / chaleco de estabilidad con una solución desinfectante de una dilución de 1:100 de lejía doméstica en agua dulce y después aclare con agua dulce y seque toda la grúa diariamente. En caso de que se produzca un incidente de contaminación, como los excrementos del paciente / usuario, limpie inmediatamente el asiento y el cinturón de seguridad / chaleco de estabilidad con la solución desinfectante*.	✓		
Limpie todas las conexiones de la batería con un estropajo de nylon.			✓
Limpie todas las superficies metálicas con una cera limpiadora para mantener el acabado del polipasto.			✓

* Cuando utilice la solución de desinfección, evite el contacto directo con la piel y los ojos. En caso de incidente de contaminación, sumerja el cinturón de seguridad o el chaleco de estabilidad en la solución de desinfección durante 10 minutos y, a continuación, aclare a fondo con agua dulce.