



Zusammenfassung der Anweisungen und Warnungen zur Verwendung des **aXs2 – Aquatic Patientenlifter**

Lesen und befolgen Sie vor dem Gebrauch alle in der Betriebsanleitung aufgeführten Benutzerhinweise.

Lesen und befolgen Sie vor dem Gebrauch alle am Hebezeug angebrachten Vorsicht- und Warnschilder.



Warnungen und Sicherheitshinweise

GEFAHR - DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNHINWEISE, ANWEISUNGEN UND DER BEDIENUNGSANLEITUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN



ACHTUNG

- NUR FÜR ERWACHSENE - Benutzung durch Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen. Nur Personen, die gesund genug für Wasseraktivitäten sind, sollten den aXs2 verwenden. Benutzer sollten ihren Arzt konsultieren, um festzustellen, ob Wasseraktivitäten für den Benutzer geeignet sind.
- Der Sicherheitsgurt muss während des Transfers des Benutzers immer angelegt werden.
- nicht springen/springen/klettern - Springen/tauchen Sie nicht vom Lifter und klettern Sie nicht darauf.
- Es darf nur EINE PERSON verwendet werden, die weniger als die maximale Gewichtsgrenze von 136 kg (300 lbs) für den aXs2 wiegt. Verwenden Sie den Heber nur zum Transport des Benutzers, nicht als Hebezeug oder Kran.
- EINKLEMMUNGSGEFAHR - Halten Sie während des Gebrauchs immer Hände und Finger von den Hebearmen fern.
- Die Batterie muss zum Aufladen vollständig aus dem Hebezeug entfernt und vom Pooldeck entfernt werden.



VORSICHT

- BATTERIELADESTAND - Prüfen Sie den Batteriestand vor jedem Gebrauch. Die Batterie muss GRÜN >50% Ladestand anzeigen, bevor Sie sie verwenden. Wenn GELB <50% Ladestand angezeigt wird, muss die Batterie vor der Verwendung vollständig geladen werden. Wenn ROT <25% Ladestand angezeigt wird, darf das Hebezeug nicht verwendet werden und die Batterie muss vor der Verwendung vollständig aufgeladen werden.
- BESCHÄDIGUNG MÖGLICH - Verwenden Sie den Sitz oder den Sitzrahmen nicht zum Bewegen oder Positionieren des aXs2.
- SCHÄDEN KÖNNEN ENTSTEHEN - Achten Sie darauf, dass sich keine übermäßige Feuchtigkeit im Batteriegehäuse ansammelt, da dies die Leistung der Batterie und des Hebezugs beeinträchtigen kann und zu einem Ausfall der Batterie und/oder des Hebezugs führen kann.



24 VDC




S.R. Smith, LLC
PO Box 400
1017 SW Berg Parkway
Canby, Oregon 97013 USA
Phone: 503-266-2231
Fax: 503-266-4334
www.srsmith.com
In den USA montiert



QNET BV
Kanstraat 19
NL-5076 NP Haaren
The Netherlands
qnet@ce-mark.com
qnet@ce-authorizedrepresentative.eu
www.ce-mark.com
www.ce-authorizedrepre-sentative.eu

TRANSFERIEREN

- Stellen Sie sicher, dass das Gewicht des Benutzers auf dem Sitz zentriert ist.
- Legen Sie den Sicherheitsgurt an und wahlweise den Stabilitätsgurt.
- Drehen Sie den Sitz in die 12:00-Position, über Wasser.
- Senken Sie den Sitz in den Pool absenken.
- Sicherheitsgurt oder optionalen Stabilitätsgurt lösen - ins Wasser überführen.
- Wenn Sie fertig sind, kehren Sie zum Sitz zurück, und stellen Sie sicher, dass das Gewicht des Benutzers auf dem Sitz zentriert ist.
- Legen Sie den Sicherheitsgurt und den optionalen Stabilitätsgurt an.
- Drehen Sie den Sitz in die ursprüngliche Transferposition.
- Heben/senken Sie den Sitz auf die richtige Transferhöhe.
- Lösen Sie den Sicherheitsgurt und den optionalen Stabilitätsgurt - steigen Sie vom Sitz ab.
-

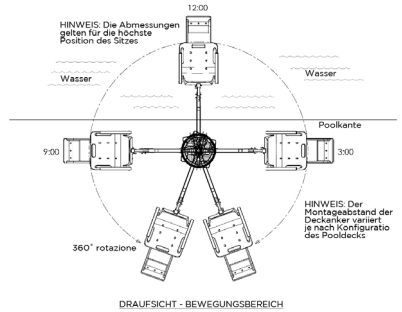

WARTUNG und REINIGUNG

- Halten Sie alle elektronischen Bauteile sauber und trocken.
- Achten Sie darauf, dass die Desinfektionslösung nicht direkt mit der Haut und den Augen in Berührung kommt.
- Beziehen Sie sich für die wöchentliche / monatliche Wartung und Reinigung des Lifters auf das Benutzerhandbuch.

Führen Sie den folgenden Zeitplan durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb vor Jedem Gebrauch sicherzustellen:

Wartung vor jedem Gebrauch durchführen	Täglich	Monatlich	Wöchentlich
Prüfen Sie den Batteriestand vor jedem Gebrauch / Laden Sie die Batterie täglich.	✓		
Kontrollbox und Batterieanschluss mit einem sauberen.	✓		
Hebezug auf Beschädigungen.	✓		
Testen Sie alle Steuertasten (Hand und Kontrollbox) auf normale Funktion.	✓		
Sprühen Sie die Getriebebaugruppe mit einem Hochleistungs-Rostschutzmittel/Schmiermittel wie LPS 3 - Heavy-Duty Inhibitor ein.		✓	
Stellen Sie sicher.			✓
Prüfen Sie den Rahmen des Hebezeugs.			✓
Reinigung nach jedem Gebrauch durchführen			
Sitz und Sicherheitsgurt / Stabilitätsweste zwischen jedem Gebrauch mit frischem Wasser abspülen - Sitz und Sicherheitsgurt / Stabilitätsweste mit einer Desinfektionslösung aus einer 1:100-Verdünnung von Haushaltsbleichmittel zu frischem Wasser reinigen und anschließend mit frischem Wasser abspülen und den gesamten Lifter täglich trocknen. Im Falle eines Kontaminationsvorfalls - z. B. Ausscheidungen des Patienten/Benutzers - reinigen Sie Sitz und Sitzgurt / Stabilitätsband sofort mit der Desinfektionslösung*.	✓		
Reinigen Sie alle Batterieanschlüsse mit einem Scheuerschwamm aus Nylon.			✓
Reinigen Sie alle metallischen Oberflächen mit einem Reinigungswachs, um das Finish des Lifters zu erhalten			✓

* Vermeiden Sie bei der Verwendung der Desinfektionslösung den direkten Kontakt mit der Haut und den Augen. Tauchen Sie bei einem Kontaminationsvorfall den Sicherheits- oder Stabilitätsgurt für 10 min. in die Desinfektionslösung ein und spülen Sie ihn anschließend gründlich mit Süßwasser ab.