



## Riassunto delle istruzioni e delle avvertenze per l'uso del **aXs2 – Paranco acquatico per pazienti**

Leggere e seguire tutte le istruzioni per l'uso elencate nel manuale del proprietario prima dell'uso.

Leggere e seguire tutte le etichette di attenzione e di pericolo situate sul paranco prima dell'us.



### **Avvertenze e riassunto della sicurezza**

**PERICOLO - LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE, ISTRUZIONI E DEL MANUALE D'USO PUÒ PROVOCARE LESIONI GRAVI O MORTALI**



#### **ATTENZIONE**

- **USO SOLO DA PARTE DI ADULTI** - Usare solo da bambini con la supervisione di un adulto. Solo le persone abbastanza sane per le attività in acqua dovrebbero usare aXs2. Gli utenti dovrebbero consultare il loro medico per determinare se le attività in acqua sono appropriate per l'utente.
- La cintura di sicurezza deve essere usata in ogni momento durante il trasferimento dell'utente.
- **NON SALTARE/IMMERGERSI/SCALARE** - Non saltare / immergersi o scalare il paranco.
- Il limite d'uso è di **UNA PERSONA** di peso inferiore al limite massimo di peso di - 300 libbre (136 kg) per the aXs2. Usare solo per il trasferimento dell'utente, non come paranco o gru.
- **PERICOLO DI SCOSSA** - Tenere sempre le mani e le dita lontane dai bracci del paranco durante l'uso.
- La batteria deve essere completamente rimossa dal paranco e posizionata lontano dal ponte della piscina per la ricarica.



#### **AVVERTENZA**

- **LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA** - Controllare il livello della batteria prima di ogni utilizzo. La batteria deve mostrare **VERDE** >50% del livello di carica prima dell'uso. Quando viene visualizzato **GIALLO** <50% del livello di carica, la batteria deve essere completamente carica prima dell'uso. Quando viene mostrato un livello di carica **ROSSO** <25%, il paranco non deve essere usato e la batteria deve essere completamente caricata prima dell'uso.
- **POTREBBERO RISULTARE DANNOSI** - Non usare il sedile o il telaio del sedile per spo-stare o posizionare l'aXs2.
- **DANNI POTREBBERO RISULTARE** - Non permettere all'eccessiva umidità di accumu-larsi nel contenitore della batteria, può influenzare le prestazioni della batteria e del paranco e può portare al guasto della batteria e/o al mancato funzionamento del paranco.



24 VDC




S.R. Smith, LLC  
PO Box 400  
1017 SW Berg Parkway  
Canby, Oregon 97013 USA  
Phone: 503-266-2231  
Fax: 503-266-4334  
www.srsmith.com  
Assemblato negli USA



QNET BV  
Kanstraat 19  
NL-5076 NP Haaren  
The Netherlands  
qnet@ce-mark.com  
qnet@ce-authorizedrepresentative.eu  
www.ce-mark.com  
www.ce-authorizedrepre-sentative.eu

## TRASFERIMENTO

- Effettuare il trasferimento sul sedile, assicurandosi che il peso dell'utente sia centrato sul sedile.
- Allacciare la cintura di sicurezza e la cinghia di stabilità opzionale.
- Ruotare il sedile in posizione 12:00, sopra l'acqua.
- Abbassare il sedile nella piscina.
- Slacciare la cintura di sicurezza e la cinghia di stabilità opzionale - trasferire in acqua.
- Una volta terminato, tornare al sedile, assicurandosi che il peso dell'utente sia centrato sul sedile.
- Allacciare la cintura di sicurezza e la cinghia di stabilità opzionale.
- Ruotare il sedile nella posizione di trasferimento originale.
- Alzare / abbassare il sedile all'altezza di trasferimento corretta.
- Slacciare la cintura di sicurezza e la cinghia di stabilità opzionale - trasferimento dal sedile.

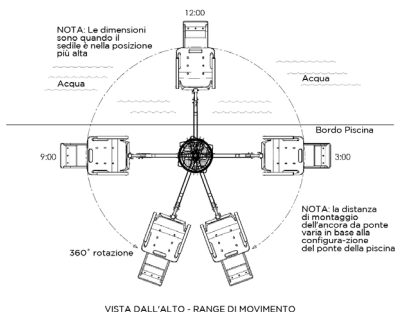

VISTA DALL'ALTO - RANGE DI MOVIMENTO

## MANUTENZIONE e PULIZIA

- Mantenere tutti i componenti elettronici puliti e asciutti.
- Evitare che la soluzione di disinfezione venga a contatto diretto con la pelle e gli occhi.
- Fare riferimento al manuale dell'utente per la manutenzione e la pulizia settimanale / mensile del paranco.

**Eseguire il seguente programma per garantire il corretto funzionamento prima di ogni utilizzo:**

Manutenzione eseguita prima di ogni uso	Ogni giorno	Settimanale	Mensile
Controllare il livello della batteria prima di ogni uso / caricare la batteria quotidianamente.	✓		
Pulire la scatola di controllo e il collegamento della batteria con uno straccio pulito e asciutto.	✓		
Esaminare il paranco per eventuali danni, hardware allentato o mancante.	✓		
Prova tutti i pulsanti di controllo (mano e scatola di controllo) per il funzionamento normale.	✓		
Spruzzare il gruppo ingranaggi con un inibitore di ruggine / lubrificante pesante come LPS 3 - Inibitore pesante.		✓	
Assicurarsi che tutte le connessioni dei cavi siano fissate correttamente.			✓
Ispezionare il telaio del paranco, il montante, il braccio di supporto e il gruppo del sedile per la ruggine.			✓
<b>Pulizia dopo ogni uso</b>			
Sciappare il sedile e la cintura di sicurezza / di stabilità con acqua dolce tra ogni utilizzo - Pulire il sedile e la cintura di sicurezza / di stabilità con una soluzione disinfettante diluita 1:100 di candeggina per uso domestico in acqua dolce e poi sciappare con acqua dolce e asciugare l'intero paranco ogni giorno. In caso di contaminazione di escrementi di pazienti / utenti, pulire immediatamente il sedile e la cintura di sicurezza / lacuna di stabilità con la soluzione disinfettante*.	✓		
Pulire tutte le connessioni della batteria con una spugna di nylon.			✓
Pulire tutte le superfici metalliche con una cera detergente per mantenere la finitura del paranco.			✓

\* Quando si usa la soluzione di disinfezione, evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi. In caso di contaminazione, immergere la cintura di sicurezza o la cinghia di stabilità nella soluzione disinfettante per 10 minuti e poi risciacquare abbondantemente con acqua fresca.